


Ergebnisse Sterilitätstestung „Lolli“- Abstrichtupfer

Probe #	Zustand	Wachstum auf (Nährmedium):			
		CNA	MAC 3	SABGC	CASO-Bouillon
1	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
2	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
3	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
4	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
5	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
6	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
7	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
8	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
9	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
10	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
11	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
12	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
13	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
14	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
15	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
16	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
17	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
18	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
19	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
20	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
21	Mund-Rachen-Abstrich	positiv	positiv	negativ	positiv

Sterilitätstestung „Lolli“-Abstrichtupfer

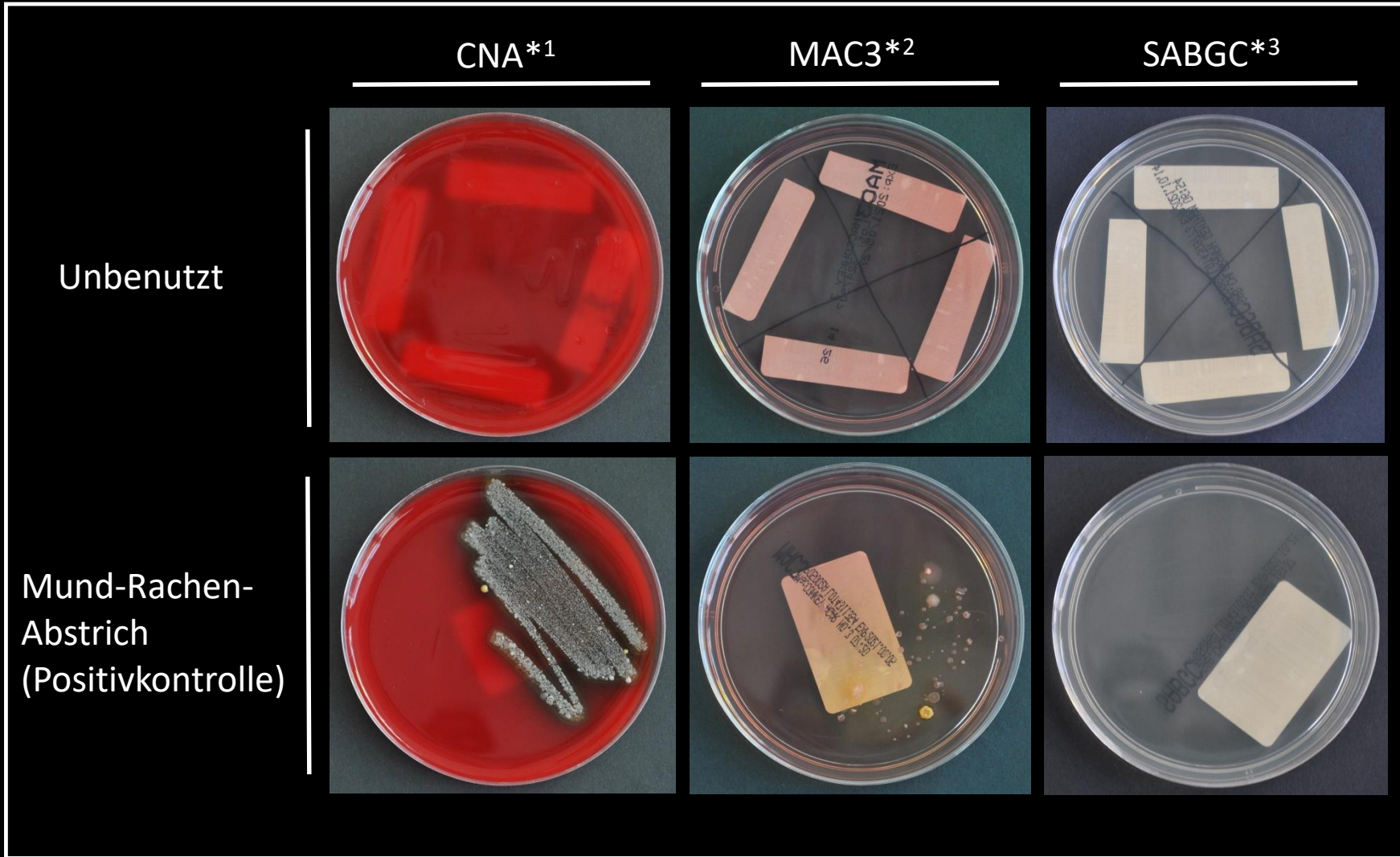

*1: Columbia-CNA-Agar: Selektives Medium zu Isolation grampositiver Bakterien, *2: MacConkey-Agar: Selektives Medium zur Isolation gramnegativer Bakterien, *3: Sabouraud GC Agar: Selektives Medium zur Isolation von Pilzen, *4: Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon: Universalmedium

Ergebnisse Sterilitätstestung Abstrichtupfer Einzeltestung

Probe #	Zustand	Wachstum auf (Nährmedium):			
		CNA	MAC 3	SABGC	CASO-Bouillon
1	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
2	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
3	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
4	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
5	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
6	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
7	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
8	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
9	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
10	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
11	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
12	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
13	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
14	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
15	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
16	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
17	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
18	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
19	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
20	unbenutzt	negativ	negativ	negativ	negativ
21	Mund-Rachen-Abstrich	positiv	positiv	negativ	positiv

Sterilitätstestung Abstrichtupfer (Einzeltestung)



CNA*1

MAC3*2



SABGC*3

CASO-Bouillon*4

Unbenutzt

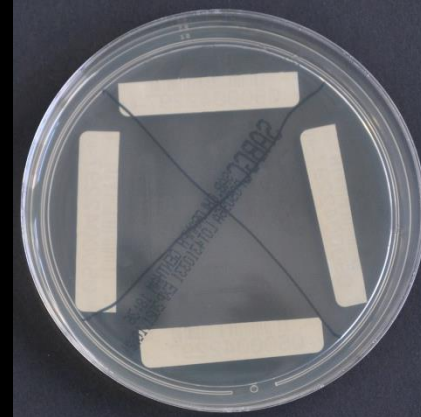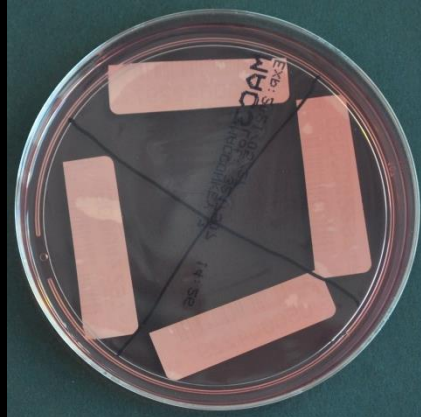

Mund-Rachen-
Abstrich
(Positivkontrolle)

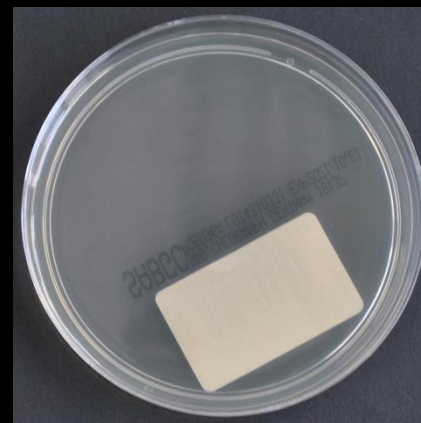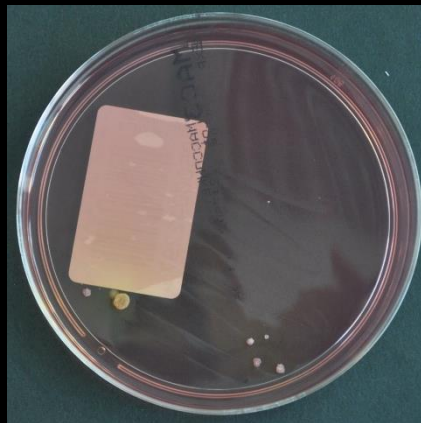

+K

Unbenutzt

*1: Columbia-CNA-Agar: Selektives Medium zu Isolation grampositiver Bakterien, *2: MacConkey-Agar: Selektives Medium zur Isolation gramnegativer Bakterien, *3: Sabouraud GC Agar: Selektives Medium zur Isolation von Pilzen, *4: Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon: Universalmedium